

OPTEC® 5000G

Tester widzenia dla medycyny pracy i transportu

Pozwala na zbadanie wszystkich parametrów wzrokowych wymaganych ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 w sprawie badań okulistycznych kierowców.

WIDZENIE ZMIERZCHOWE – OLŚNIENIE – WRAŻLIWOŚĆ NA KONTRAST – POLE WIDZENIA

Podpórka na czoło
zapewnia prawidłową
pozycję pacjenta
dzięki wbudowanemu
wyłącznikowi

Gniazdo na dodatkowe soczewki
opcjonalne badanie odległości
pośrednich dostępne dla: 50 cm,
57 cm, 66 cm, 80 cm i 1m.

**Lekki, przenośny
z wbudowanym uchwytem**
6,8 kg




TEST POŁA WIDZENIA
do badania pola widzenia
w płaszczyźnie horyzontalnej,
bodźce rozmieszczone
skroniowo 85°, 70° i 55°
oraz nosowo 45°

Okno obserwacyjne
umożliwia badającemu
wskazanie pacjentowi
konkretnego obrazka
testowego (znajduje się po
obu stronach urządzenia)

**Pokrętko zmiany
testów**
urządzenie może
być obsługiwane
z obydwu stron

System soczewek dal/bliż
dwa oddzielne kanały optyczne
dla dokładnych pomiarów dali
(6m) i bliży (40 cm)

**Wyłącznik pochylenia/
wysokości**
zapewnia prawidłową
pozycję pacjenta

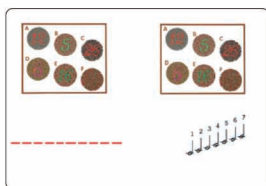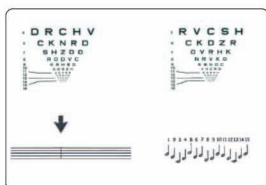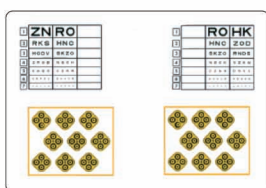

PROSTOTA OBSŁUGI – WIARYGODNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

OPTEC® 5000G zawiera następujące testy:

- **ostrości wzroku do dali i bliży**
jednocześnie i obuocznie (optotypy literowe ETDRS i pierścienie Landolta, możliwe też haki)
- **widzenia do odległości pośrednich** (50-100 cm)
- **widzenia barw** (Ishihara)
- **widzenia przestrzennego** (stereopsja do dali)
- widzenia obuocznego (foria wertykalna i horyzontalna, fuzja)
- przesiewowego **badania pola widzenia** (horyzontalnie od 45° nosowo do 85° skroniowo)
- **wrażliwości na kontrast** na optotypach literowych (test Regana)
- w opcji **test wrażliwości na kontrast prążkowy** (FACT)
- astygmatyzmu (figura promienista)
- **ośnienienia** (źródło obwodowe)
- **widzenia zmierzchowego** (mezopowego)

Lekki, przenośny – ergonomiczna walizka na kółkach.

W komplecie oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruków wyników badań.

• Optec® 5500/5500P z pilotem zdalnego sterowania zawiera: zestaw akcesoriów i jeden standardowy zestaw slajdów.

□ • Optec® 5500P zawiera test peryferyjny

□ • Optec® 5000/5000P sterowany ręcznie zawiera: zestaw akcesoriów i 1 standardowy zestaw slajdów

□ • Optec® 5000P zawiera test peryferyjny

Zestaw akcesoriów zawiera: pokrowiec, wskaźnik, czyścik do soczewek, bibułki jednorazowe, arkusze wyników oraz podręcznik użytkownika.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

InView Medical Sp.J.

Pl. Powstańców Śl. 17A/222 (Villa Verona Park); 53-329 Wrocław

tel. (71) 787 75 40, fax (71) 787 75 41

www.inviewmedical.pl, email: info@inviewmedical.pl